

ICX

DAS FAIRE PREMIUM
IMPLANTAT-SYSTEM.

ICX-ACTIVE WHITE

DAS ICX-KERAMIK-IMPLANTAT.

DIE METALLFREIE, ÄSTHETISCHE
ALTERNATIVE ZU TITAN:

- ✓ Einteiliges Keramik-Implantat
- ✓ Hohe Primärstabilität selbst bei ungünstigen Knochenverhältnissen
- ✓ Knochenverdichtende Eigenschaften
- ✓ Aktive Implantatausrichtung für eine optimale endgültige Insertion
- ✓ Maximale Ästhetik



ÄSTHETIK, SOFORT-IMPLANTATION
UND VORHERSAGBARKEIT!

VORSPRUNG DURCH INNOVATION.

medentis
medical

www.medentis.de

PATIENTEN FORDERN ÄSTHETIK, SOFORT-IMPLANTATION UND VORHERSAGBARKEIT!

ICX-ACTIVE WHITE ERFÜLLT DIESE WÜNSCHE.

Das einteilige ICX-ACTIVE WHITE Implantat zeichnet sich durch ein doppelläufiges Kompressionsgewinde, einen konischen Implantatkern, schneidende Gewindeflächen im Apexbereich, weit ausladende Gewindeflanken sowie eine Kammer für die eventuelle Rückwärtsschraubung aus.

Damit unterscheidet sich das ICX-ACTIVE WHITE von herkömmlichen selbst-schneidenden Implantaten, die bei der Insertion durch den Knochen schneiden. **Durch den sich erweiternden Gewindedurchmesser führt bei ICX-ACTIVE WHITE jede Drehung zu einer progressiven Knochenverdichtung.** Zusammen mit den apikalen Bohrschneiden ermöglicht dieses Verfahren, sofern erforderlich, während der Insertion kleinere Anpassungen an der Implantatausrichtung vorzunehmen und die endgültige Position der prothetischen Versorgung zu optimieren, ohne dabei die Primärstabilität zu gefährden.

Das Implantatdesign bietet speziell im weichen und schmalen Knochen bei unterdimensionierter Aufbereitung einen substanzerhaltenden Osteotom-Effekt.

Aus diesen dargestellten Eigenschaften ergeben sich spezifische Funktionsmerkmale, wie u.a. selbstschneidender Effekt, die Möglichkeit der Richtungsänderung in der Einbringphase, hohe Primärstabilität auf Grund des Osteotom-Effektes und der Knochenverdichtung. Diese Besonderheiten erweitern das primäre Anwendungsspektrum des ICX-Systems, indizieren aber auch Vorbehalte, wie Kondensationsverfahren.

MEHR FLEXIBILITÄT DURCH FORTSCHRITTLICHE PROTHETISCHE VERSORGUNG

Die prothetische Versorgung für ICX-ACTIVE WHITE bietet maximale Flexibilität bei der prothetischen Behandlung.

Das Implantatdesign des ICX-ACTIVE WHITE Implantatsystems ermöglicht eine wesentliche Vereinfachung bei Sofortversorgung/Sofortfunktion und allen klinischen Situationen mit qualitativ und quantitativ gemindertem Knochenangebot.

Die hohe Primärstabilität bietet günstige Voraussetzungen für die Kombination Implantation und simultane Augmentation.

Die ICX-ACTIVE WHITE -Implantate zeigen Vorteile im ästhetischen Umfeld durch ihre weiße oder eingefärbte Farbe. Zudem bietet sich die Möglichkeit, auch die Suprastruktur in demselben Material mittels verblendeter Zirkonkronen zu gestalten. Der zunehmende Patientenwunsch nach metallfreien Versorgungen kann damit erfüllt werden.

- ✓ Hohe Primärstabilität selbst bei ungünstigen Knochenverhältnissen
- ✓ Knochenverdichtende Eigenschaften
- ✓ Aktive Implantatausrichtung für eine optimale endgültige Insertion

medentis
medical



ICX-ACTIVE WHITE

DAS ICX-KERAMIK-IMPLANTAT.

Service-Tel.: +49 (0)2641 9110-0 · www.medentis.de


ICX-ACTIVE WHITE

DAS ICX-KERAMIK-IMPLANTAT.

Gingivahöhe = 2,5
Kopfhöhe K = 4,5



Gingivahöhe = 4,5
Kopfhöhe K = 4,5

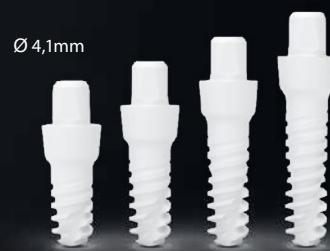

... FÜR STANDARD- UND SOFORT-IMPLANTATION

- ✓ Osseointegrations-Garantie
- ✓ Natürlich schön
- ✓ Sanft durchscheinend in der eigenen Zahnfarbe
- ✓ Metallfrei und sehr gut verträglich
(biokompatibel)
- ✓ Dauerhaft stabil für Front und Seitenzähne
- ✓ Nicht osseointegrierte ICX-ACTIVE WHITE
-Implantate werden kostenfrei umgetauscht
- ✓ Einzigartiges Design, das die Behandlungsmöglichkeiten erweitert

Das ICX-ACTIVE WHITE besteht aus einem bioinerten, gewebeverträglichen Werkstoff, der in der Lage ist, mit dem Knochen und Weichgewebe ohne Fremdkörperreaktionen zu interagieren.

Es findet eine Osseointegration der Zirkonoxidimplantate auf einem ähnlichen Niveau wie bei herkömmlichen Titanimplantaten statt.

EIN KONZEPT FÜR DIE SPEZIELLEN BEDÜRFNISSE VON ZAHNMEDIZINERN

Immer mehr wächst die Anzahl der Fälle, wo der Zahnarzt dazu gezwungen ist, im ästhetisch anspruchsvollen Bereich eine Sofortimplantation durchzuführen.

Das bedeutet, dass das Implantat unmittelbar nach der Zahnextraktion in das im Kiefer vorhandene Knochenfach eingesetzt und darauf die provisorische Krone aufgesetzt wird.

So kann der extrahierte Zahn gleich ersetzt werden.

Sofortimplantation und Sofortbelastung sind nur unter bestimmten chirurgischen Voraussetzungen möglich. ICX-ACTIVE WHITE bietet Zahnmedizinern eine sehr hohe Flexibilität hinsichtlich Insertion und prothetischer Möglichkeiten.



medentis
medical

Service-Tel.: +49 (0)2641 9110-0 · www.medentis.de

ICX-ACTIVE-WHITE-Keramik-Implantate

Stück: € 333,-* Ø 4,1mm

X	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	*Preis (Euro)
		ICX-ACTIVE-WHITE KERAMIK IMPLANTATE – STÜCKPREIS		
	AW-002-425080	ICX-ACTIVE WHITE-Implantat Ø 4,1 · L 8mm, einteilig, GH 2,5mm , K 4,5mm		333,-
	AW-002-425100	ICX-ACTIVE WHITE-Implantat Ø 4,1 · L 10mm, einteilig, GH 2,5mm , K 4,5mm		333,-
	AW-002-425125	ICX-ACTIVE WHITE-Implantat Ø 4,1 · L 12,5mm, einteilig, GH 2,5mm , K 4,5mm		333,-
	AW-002-425150	ICX-ACTIVE WHITE-Implantat Ø 4,1 · L 15mm, einteilig, GH 2,5mm , K 4,5mm		333,-
	AW-002-426080	ICX-ACTIVE WHITE-Implantat Ø 4,1 · L 8mm, einteilig, GH 4,5mm , K 4,5mm		333,-
	AW-002-426100	ICX-ACTIVE WHITE-Implantat Ø 4,1 · L 10mm, einteilig, GH 4,5mm , K 4,5mm		333,-
	AW-002-426125	ICX-ACTIVE WHITE-Implantat Ø 4,1 · L 12,5mm, einteilig, GH 4,5mm , K 4,5mm		333,-

- ☐ **Ja**, bitte rufen Sie mich zurück. Ich möchte einen Termin vereinbaren.
- ☐ **Ja**, bitte senden Sie mir das ICX-MAGELLAN-Info-Paket an untenstehende Adresse zu.
- ☐ **Ja**, bitte senden Sie mir das ICX-System-Info-Paket an untenstehende Adresse zu.

Kostenfreier Express-Service für Sie!

Wenn Sie bis 19.00 Uhr bestellen, erhalten Sie Ihre Ware mit „Express-Saver“ bis mittags des nächsten Werktages (Mo.-Fr.) geliefert; und das ohne Versandkosten, innerhalb Deutschlands.

Name

Kd.-Nr.

Datum, Unterschrift

Praxis Stempel

*Alle Preise in Euro zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer, bis auf Widerruf, (Stand 01.02.23).
Ich akzeptiere die AGB's der medentis medical GmbH.