

ICX-P5

PREMIUM & FAIR!

INTRAORAL SCANNER

5 STARKE GRÜNDE FÜR IHREN EINSTIEG IN DIE DIGITALE ABDRUCKWELT:

- 1** KEINE LAUFENDEN KOSTEN
- 2** GÜNSTIGE SCANS PITZEN
- 3** AUTOMATISCHE KALIBRIERUNG
- 4** OFFENE SCHNITTSTELLEN
- 5** LANGFRISTIGE SICHERHEIT DURCH PARTNERSCHAFT
MIT EINEM DER WELTWEIT GRÖSSTEN SCANNER-
PRODUZENTEN



**Wir denken nicht in Quartalen – sondern in Jahren.
Für echte Zukunftssicherheit in Ihrer Praxis.**

*Bei einer Leasing-Laufzeit von 60 Monaten. (Gesamt: 12.700 €) · *Preise zzgl. gesetzl. MwSt..

ONE VISION. SMART & INNOVATIV!

medentis
medical

ICX-P5

PREMIUM & FAIR!

INTRAORAL SCANNER

IHR EINSTIEG IN DIE DIGITALE ABDRUCKWELT –
SO EINFACH WIE DER SCANNER SELBST:

Sofort-Barpreis: nur 9.999 €

Oder bequem finanzieren:


60 Raten à 207 € (Gesamt: 12.700 €)



*Bei einer Leasing-Laufzeit von 60 Monaten.
*Preise zzgl. gesetzl. MwSt..

~~Listenpreis~~
~~12.700 €~~
Sofort-Barpreis
9.999,00 €
Bei sofortiger Zahlung sparen Sie
2.701€ gegenüber dem
Listenpreis!

medentis
medical

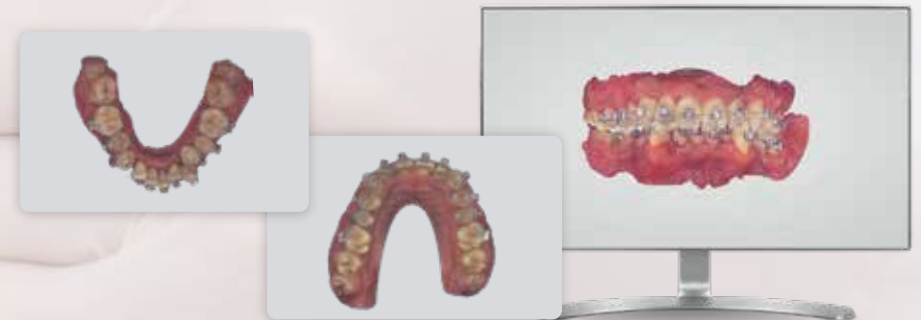

EINFACH. OFFEN. WIRTSCHAFTLICH.

5 STARKE GRÜNDE FÜR IHREN EINSTIEG IN DIE DIGITALE ABDRUCKWELT:

- 1 KEINE LAUFENDEN KOSTEN**
- 2 GÜNSTIGE SCANSPITZEN**
- 3 AUTOMATISCHE KALIBRIERUNG**
- 4 OFFENE SCHNITTSTELLEN**
- 5 LANGFRISTIGE SICHERHEIT DURCH PARTNERSCHAFT
MIT EINEM DER WELTWEIT GRÖSSTEN
SCANNER-PRODUZENTEN**

Wir denken nicht in Quartalen – sondern in Jahren.
Für echte Zukunftssicherheit in Ihrer Praxis.

medentis
medical

Zum ICX-Shop!





WIRTSCHAFTLICHKEIT & KOMFORT

1

1. KEINE LAUFENDEN KOSTEN

Was einmal gekauft ist, gehört Ihnen.

Keine Abonnements. Keine Lizenzen. Keine Folgekosten.
Der ICX-P5 ist die wirtschaftlich sinnvolle Entscheidung für moderne Praxen.

Transparenter Preis. Maximale Planungssicherheit.

Sofortkauf: Nur 9.999 €

Finanzierung: 60 Monate x 207 € (Insgesamt: 12.700 €)

Keine Abo-Gebühren. Keine Folgekosten. 100 % Kontrolle.

2

2. EINFACHE & GÜNSTIGE SCANSPITZEN

Hygiene, Effizienz und Kostenkontrolle in einem.

Die Scanspitzen lassen sich schnell und unkompliziert tauschen – sicher, wirtschaftlich, zeitsparend.

3

3. AUTOMATISCHE KALIBRIERUNG

Startklar, wann immer Sie es sind.

Kein Kalibrieraufwand, kein Zeitverlust. Der Scanner justiert sich systemseitig selbst – präzise und zuverlässig.

Zum ICX-Shop!



OFFENHEIT & ZUKUNFTSSICHERHEIT

ICX-P5
PREMIUM & FAIR!

4

4. OFFENE SCHNITTSTELLEN

Der Scanner, der sich anpasst – nicht umgekehrt.

Kompatibel mit Aligner-Portalen, Fräsmaschinen und Praxis-Management-Systemen. Einfach anschließen, nahtlos integrieren.



5

5. LANGFRISTIGE SICHERHEIT & VERLÄSSLICHE PARTNERSCHAFT

Kein Start-up. Keine Investoren. Keine Unsicherheiten.

Panda®, einer der größten chinesischen Hersteller mit über 10.000 verkauften Geräten, entwickelt Hard- und Software selbst.

Gemeinsam mit Panda® bietet medentis medical Ihnen nicht nur Technik, sondern ein nachhaltiges Versprechen: Betreuung, Service und Zusammenarbeit auf Augenhöhe – jetzt und in Zukunft.

➔ **KOSTENLOSER ICX-DEMO SCAN!** ◀

VEREINBAREN SIE EINEN TERMIN ZUR EINER
KOSTENLOSEN SCANNER-VORFÜHRUNG!

**KONTAKTIEREN SIE
MICH GERNE:**

STEFAN NEUMANN
VERTRIEBSLEITER INTRAORAL SCANNER

Tel: +49 (0)151 513 562 56
s.neumann@medentis.de



*Bei einer Leasing-Laufzeit von 60 Monaten.

*Preise zzgl. gesetzl. MwSt..

ICX-P5

PREMIUM & FAIR!

A. KERNFUNKTIONEN DER SOFTWARE

1) Künstliche Intelligenz

- Automatische Erkennung von Weich- und Hartgewebe
- Reduktion überflüssiger Daten
- Hochpräzise 3D-Zahnmodelle



2) 3D-Vorschau & KI-Diagnostik

- 3D-Vorschau für Online-Konsultationen
- Automatisch generierte KI-Berichte
- Sofortiges Teilen über QR-Code
- Fokus auf präventives Mundgesundheitsmanagement



3) Unterschnitt-Inspektion

- Farblich dargestellte Unterschnitte zur Unterstützung bei Platzierungsentscheidungen
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Zahnarzt und Zahntechniker

4) Echte Farbwiedergabe

- Visualisierung der Okklusion in Echtfarben
- Ein-Klick-Farbwechsel für detaillierte Modellanalyse



ICX-P5

PREMIUM & FAIR!



B. EINFACHE & HYGIENISCHE BEDIENUNG

1) Kostenlose Software-Upgrades & Zusatztools

Panda-Scannsoftware kostenlos upgraden

PandaOrthoSim inklusive: Ein leistungsstarker kieferorthopädischer Simulator zur Visualisierung von Behandlungsergebnissen.

PANDA UNION: Mobile App für Zahnärzte zur einfachen und umfassenden Behandlung aller Fälle; digitales Lächel-Design mit KI; einfache und schnelle Kommunikation mit Labor und technischem Support

2) Bedienung ohne Maus

Steuerung über einen einzigen Knopf:

Klicken = Start Nochmal klicken = Pause Doppelklick = Farbumschaltung

3 Sekunden drücken = Beenden

Bewegungssensorik ermöglicht intuitive, berührungsfreie Steuerung



medentis
medical

ICX-P5

PREMIUM & FAIR!

B. EINFACHE & HYGIENISCHE BEDIENUNG

3) Kalibrierung

Notwendig bei Erst-Verwendung des Rechners oder nach Stößen

Kalibrierung dauert nur 2 Minuten



Empfehlungen:

Bei täglicher Nutzung (10 Fälle/Tag): Monatlich

Bei geringer Nutzung: Alle zwei Monate

Kalibriereinheit ist langlebig (außer bei Beschädigung)

Ein-Klick-Farbwechsel für detaillierte Modellanalyse

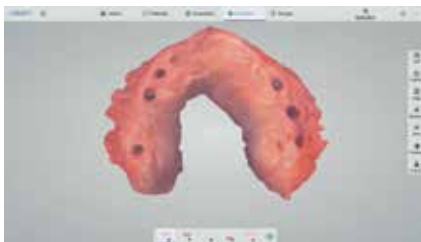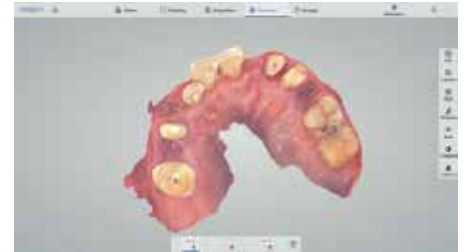

ICX-P5

PREMIUM & FAIR!

C. TECHNISCHE DATEN UND HINWEISE ZUR VERWENDUNG DER SPITZE

Spitzengröße: Länge: 83 mm · Breite: 19 mm · Höhe: 14 mm

Scanfenster: 18 mm × 16 mm

Wiederverwendbare, autoklavierbare Spitze:

Sterilisation bei: 134 °C für mindestens 6 Minuten oder 121 °C für mindestens 15 Minuten

Maximale Anzahl empfohlener Autoklavierzyklen: 100

Wichtige Hinweise zur Reinigung und Handhabung:

Verboten: Verwenden Sie keine Dreiwegespritze, um in die Spitze zu blasen. Dies könnte Staubpartikel in das fotoelektrische System des Geräts befördern und die Funktion beeinträchtigen.

Reinigung der Linse: Bei Flecken auf dem Linsenglas geben Sie etwas wasserfreien Alkohol hinein.

Schütteln Sie die Linse leicht trocken, bevor Sie das Glas vorsichtig abwischen.

Achtung: Vermeiden Sie Kratzer oder Beschädigungen am Glas, da dies die Bildqualität beeinträchtigen kann.

Kabel: Das Kabel ist austauschbar im Falle eines Defekts.



D. KOMPATIBILITÄT & DATENMANAGEMENT

Datenexportformate: STL, PLY, OBJ – kompatibel mit gängigen CAD/CAM-Systemen und Fräsmaschinen

ICX-P5

PREMIUM & FAIR!



INKL. 6 SCAN-SPITZEN!

MEHR EFFIZIENZ. MEHR KOMFORT. MEHR UMSATZ.
DIGITAL IST DEIN VORTEIL!

medentis
medical

SPEZIFIKATION · PRODUKT INFORMATION

KATEGORIE	ICX-P5
Anti-Beschlag-System	Intelligente Heizung
Genauigkeit	≤;7µm
Richtigkeit	≤;5µm
Handstück Gewicht	138g (192g mit Kabel)
Handstück Dimension	22lx27x25mm
Handstück-Gehäuse	Hochfeste Luftfahrt-Aluminium-Legierung
Scanfeld	18xl6mm
Scan-Tiefe	0-20mm
Echte Farbe	Volle HD
Spitzen	x 6 (autoklavierbar)
Autoklav-Zyklus für Spitzen	max. 100 Mal
Datenschnittstelle	USB3.0
Kabellänge (m)	1.85m



SOFTWARE-FUNKTIONEN

Hinterschnittprüfung

Zusätzliche Bestätigung vorhanden, Farbverlauf zeigt Hinterschnitt an, genaue Vorhersage und verbessert die Kommunikationseffizienz zwischen Ärzten und Technikern.

Zeichnen der Präparationsgrenze

Zeichnen Sie genaue und klare Präparationsgrenzen, um Ärzte und Techniker zu verbinden und Nacharbeiten zu reduzieren.

Scan vor der Präparation


Erfassen Sie den Zustand der Zähne vor der Präparation, speichern Sie Bissdaten und formen Sie die ursprünglichen gesunden Zähne neu.

Bissprüfung

Farbverlauf zeigt Abstand an, beurteilt den Restorationsabstand genau und hilft, die Wirkung der Zahnpräparation zu verbessern.

Data Lock

Sperrt die Zahnpositionen, um Datenverlust zu verhindern und übermäßige Dateninterferenzen zu vermeiden.

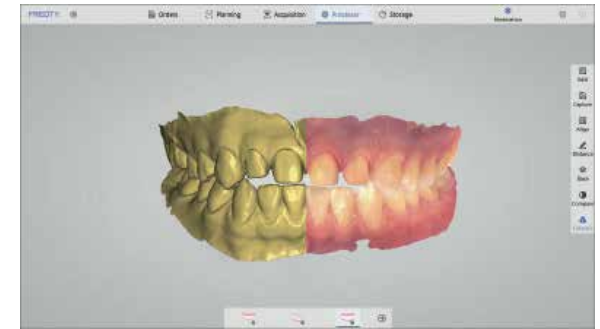

SOFTWARE-FUNKTIONEN

Farbwechsel

Echtfarbige Kiefer, klare Wiederherstellung von Details, ein Klick zum Wechseln der Farben und zur umfassenden Überprüfung der Modelldaten.

AI Intelligent Scan

Weiches und hartes Gewebe einfach identifizieren, redundante Daten eliminieren und präzise Zahnmodelle erstellen.

Kieferorthopädische Simulation


Erstellen Sie Simulationsanimationen, um Ärzten und Patienten die Kommunikation zu erleichtern, Daten schnell zu teilen und Bestellungen zu fördern.

Überwachung des Krankheitsverlaufs

Vollständige Diagnose- und Behandlungsüberwachung, vergleichende Beobachtung von Modellunterschieden, simultane Analyse, umfassende Verbesserung von Diagnose und Forschung.

Manschettenwerkzeug

Löschen Sie Manschettendaten, vermeiden Sie Gewebestörungen und sperren Sie automatisch, um die Datenzuverlässigkeit erheblich zu verbessern.

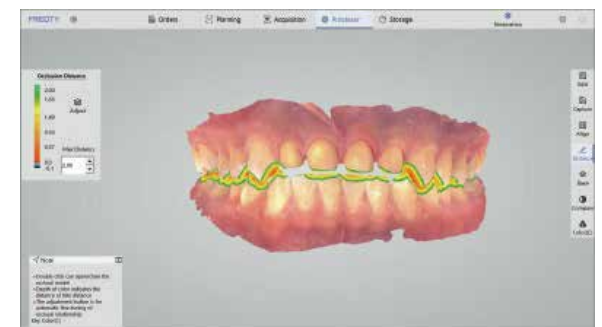

SOFTWARE

<u>Kategorie</u>	<u>ICX-P5 Intraoral Scanner</u>
<u>Arten des Scannens</u>	<u>Kieferorthopädie, Implantat, Restauration</u>
<u>Bilderfassung</u>	<u>Ja</u>
<u>3D-Datenvorschau</u>	<u>Ja</u>
<u>Ausgabedateien</u>	<u>STL, PLY, PTY, OBJ</u>
<u>Cloud-Dienst</u>	<u>Ja</u>
<u>Preis des Cloud-Dienstes</u>	<u>5 GB/frei</u>
<u>Direkte Kompatibilität mit Dental CAD</u>	<u>Exocad*</u>
<u>Hauptbildverarbeitungswerkzeuge</u>	<u>Schneiden/Bearbeiten/Wiederherstellen/Sperren usw.</u>
<u>Zeichnen der Präparationsgrenze</u>	<u>Ja</u>
<u>Okklusale Übereinstimmung</u>	<u>Ja</u>
<u>Unterschnitt</u>	<u>Ja</u>
<u>Datenvergleich</u>	<u>Ja</u>
<u>KI-Technologie</u>	<u>Automatische Gewebeentfernung, korrekte Überlappung usw.</u>
<u>Softwarelizenz</u>	<u>Kostenlos</u>



PC-ANFORDERUNGEN

<u>Kategorie</u>	<u>ICX-P5 Intraoral Scanner</u>
<u>CPU</u>	<u>Intel i7-12700H/Intel i7 - 11800H oder höher</u>
<u>RAM</u>	<u>32GB</u>
<u>Festplatte</u>	<u>SSD 512GB oder höher</u>
<u>GPU</u>	<u>RTX3060 oder höher</u>
<u>Betriebssystem</u>	<u>Windows 10/11, (Professional/ Enterprise), 64bit</u>
<u>Anzeige</u>	<u>Auflösung 1920x1080 und höher</u>



GARANTIE

<u>Kategorie</u>	<u>ICX-P5 Intraoral Scanner</u>
<u>Standardgarantie</u>	<u>2 Jahre Garantie</u>

Ab Rechnungsdatum auf Material- und Produktionsfehler (ausgenommen unsachgemäße Handhabung).
Im Garantiefall: Kundenservice 02641 911 00. Gesetzliche Gewährleistung bleibt unberührt.

ICX-P5

PREMIUM & FAIR!



Stiller Betriebsprozess

Ihr entspannter Zahnarztbesuch – stressfrei und angenehm.

Bewegungssensorik

Steuern Sie Ihre Geräte ganz ohne Berührung – hygienisch, effizient und innovativ.

Eine Taste, unendliche Kontrolle

Intuitiv. Einfach. Durchdacht. Dieses Design macht Ihre Produktnutzung leichter – ein Tastendruck genügt, kein Mauszeiger nötig.

Anti-Beschlag-Technologie

Nie mehr beschlagene Gläser – unsere Sofortheiztechnologie macht's möglich.

FUNKTIONEN

ICX-P5
PREMIUM & FAIR!



Schlank und kompakt

Nur 138g · 221x27x25mm



Extrem schnell und präzise

1 Minute ultraschneller Scan · 7µm ultra-hohe Genauigkeit



Plug & Play

Kein Netzadapter erforderlich



Ergonomisches Design

Weiss – max. 100 Autoklavier-Zyklen



medentis
medical



Implantatprothetik

Offenes System für digitale
Implantatabformungen

ICX-Implantat-System

ABÜTMENTS,
BRÜCKEN
UND STEGE

Offenes System für Kronen & Brücken

Für alle Indikationen

ICX-MAGELLAN

KRONEN UND
BRÜCKEN MIT
VORPRÄPARATION
AUF ZAHNNIVEAU

LABOR UND
TECHNISCHER
SUPPORT

Integrierter Cloud-Service

Für die Laborpartner und
Patientendaten

Digitale KFO

Zur Gestaltung von 3D-Modellen
(STL/PLY-Format)

DIGITALE
KIEFERORTHOPÄDIE

SCHLAFSCHIENEN

Orale Schlafschienen

Zur Gestaltung von 3D-Modellen
(STL/PLY-Format)

DER DIGITALE FORTSCHRITT FÜR IHRE PRAXIS ODER IHR LABOR: DER ICX-P5 INTRAORAL SCANNER


Der moderne Intraoralscanner revolutioniert die digitale Abformung: schnell, präzise und komfortabel – für Behandler und Patient.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Exakte digitale Abformungen in Echtzeit – ohne Abdruckmaterial
- Komfort für den Patienten: Kein Würgereiz, kein unangenehmes Abdrucknehmen
- Effizienter Workflow: Nahtlose Datenübertragung an das Dentallabor
- Zeitersparnis durch weniger Korrekturabdrücke und schnellere Weiterverarbeitung
- Hohe Genauigkeit bei Kronen, Brücken, Implantaten und Alignern
- Digitale Archivierung statt physischen Modellen

Egal ob Zahnarztpraxis oder Dentallabor – der Intraoralscanner ist ein zukunftsicheres Werkzeug, das die Qualität steigert und Ihre Praxis- Abläufe optimiert.



OPTIMIEREN SIE IHRE PATIENTENVERSORGUNG

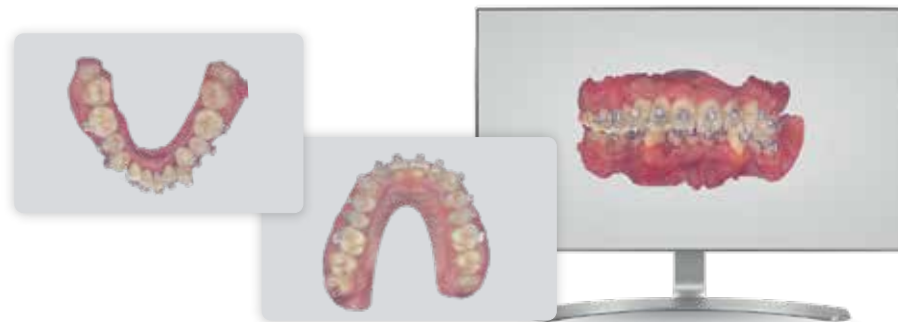

ICX-P5
PREMIUM & FAIR!



ÜBERBLICK INTRAORAL SCANNER: ICX-P5 & ICX-FREE

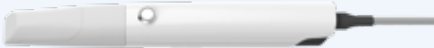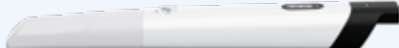Model Intraoral Scanner	ICX-P5	ICX-FREE (kabellos)
Scan-Prinzip	Scannen mit kodiertem Strukturlicht	Scannen mit kodiertem Strukturlicht
Gesamtgröße	221x27x25mm	241 x 30 x 28 mm
Spitzentyp	83 x 19 x 14 mm	83 x 19 x 14 mm
Scanbereich	18x16 (N)mm 	18x16 (N)mm 
Richtigkeit	7µm	7µm
Präzision	5µm	5µm
Bildfrequenz	24fps	24fps
Tiefenschärfe	0-20mm	0-20mm
Gewicht	138g	178g
Autoklavierzyklus für Spitzen	50-100	50-100
Kühlsystem	Turbo-Lüfterkühlung	Turbo-Lüfterkühlung
Akku-Laufzeit	-	3,5 Stunden Dauerbetrieb/24 Std. Stand-By
Batterie Ladezeit	-	Wird in Dokking Station geladen
Scan-Zeit	1,5 Min. Einzelbogen / 2 Min. Kieferorthopädische Vollversorgung	Ultraschneller Scan in unter 1. Minute des gesamten Zahnbogens




ICX-FREE
(kabellos)

Zum ICX-Shop!



ICX-P5

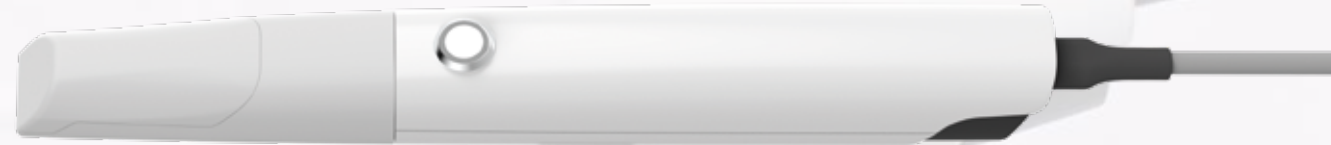

INTRAORAL SCANNER: ICX-P5 & ICX-FREE


➔ **KOSTENLOSER ICX-DEMO SCAN!** ◀

VEREINBAREN SIE EINEN TERMIN ZUR EINER
KOSTENLOSEN SCANNER-VORFÜHRUNG!

**KONTAKTIEREN SIE
MICH GERNE:**

STEFAN NEUMANN
VERTRIEBSLEITER INTRAORAL SCANNER

Tel: +49 (0)151 513 562 56
s.neumann@medentis.de

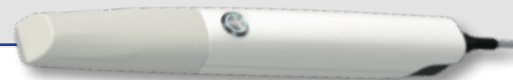

ICX-BAMBOO PRO

FÜR IHREN ICX-P5 INTRAORAL SCANNER

ICX-BAMBOO PRO HIGHLIGHTS

- ➔ 23,8" GROSSES, LEISTUNGS-STARKES TOUCH-DISPLAY – OPTIMIERT FÜR ALLE SCANNER
- ➔ KABELLOSE MOBILITÄT
- ➔ INTEGRIERTER HOCHLEISTUNGSAKKU
- ➔ SOFTWARE VORINSTALLIERT
- ➔ READY-TO-SCAN
- ➔ AUTOMATISCHE ÜBER-NACHT-AUFLADUNG

*Bei einer Leasing-Laufzeit von 60 Monaten.

*Preise zzgl. gesetzl. MwSt..

~~Listenpreis~~
~~11.340 €~~

Sofort-Barpreis
8.999,00 €

Bei sofortiger Zahlung sparen Sie
2.341€ gegenüber dem
Listenpreis!



1. Leistungsstarker integrierter Akku

Der Bamboo Utral ist mit einem integrierten 1-kWh-Akku ausgestattet, der auch bei fehlender externer Stromversorgung eine reibungslose Nutzung des Intraoralscanners ermöglicht.

2. Lange Laufzeit für den ganzen Arbeitstag

Mit einer vollständigen Ladung kann das Gerät einen gesamten Arbeitstag problemlos betrieben werden – ideal für Praxisalltag oder mobile Einsätze.

3. Hinweis zur Akkulebensdauer

Ähnlich wie bei einem Laptop nimmt die Akkukapazität mit der Zeit ab. Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, wird empfohlen, das Gerät möglichst mit Netzstrom zu betreiben, sofern verfügbar.



Zum ICX-Shop!



- ➔ Gewicht: 21 kg
- ➔ Verpackungsgröße 515 mm x 540 mm x 1390 mm
- ➔ 23,8-Zoll-Touchscreen mit freiem Blickwinkel
- ➔ i/Prozessor der 12. Generation
- ➔ Starke Leistung
- ➔ Geräuscharme Riemenscheibe, stabile Unterstützung
- ➔ Halterung für ICX-P5/P4/P3-Scanner
- ➔ Stabile Platzierung
- ➔ Der Bildschirm kann aus mehreren Winkeln frei eingestellt werden, was die Anwendung erleichtert
- ➔ Unterbrechungsfreie USV-Stromversorgung, keine Sorge vor Datenverlust
- ➔ Bremsen und anhalten, sicher und zuverlässig

DAS UNSCHLAGBARE KOMBI-PAKET FÜR IHRE PRAXIS!



ICX-P5
PREMIUM & FAIR!

UND

ICX-BAMBOO PRO
FÜR IHREN **ICX-P5**
INTRAORAL SCANNER



KOMBI-PAKET:

MONATLICHE RATE:

340,- €*

*Bei einer Leasing-Laufzeit von 60 Monaten.

~~Listenpreis~~
~~18.999 €~~

Sofort-Barpreis
16.999,00 €

Bei sofortiger Zahlung sparen Sie
2.000€ gegenüber dem
Listenpreis!

DAS DREAM-TEAM FÜR IHRE PRAXIS/LABOR!

ICX-P5
PREMIUM & FAIR!

INTRAORAL SCANNER



~~Listenpreis~~
~~12.700 €~~

Sofort-Barpreis
9.999,00 €


Bei sofortiger Zahlung sparen Sie
2.701€ gegenüber dem
Listenpreis!

MONATLICHE RATE:

207,- €*

*Bei einer Leasing-Laufzeit von 60 Monaten.

Die Lieferzeit beträgt ca. 8 Wochen. Die Angebote sind gültig bis auf Widerruf. *Preise zzgl. gesetzl. MwSt..

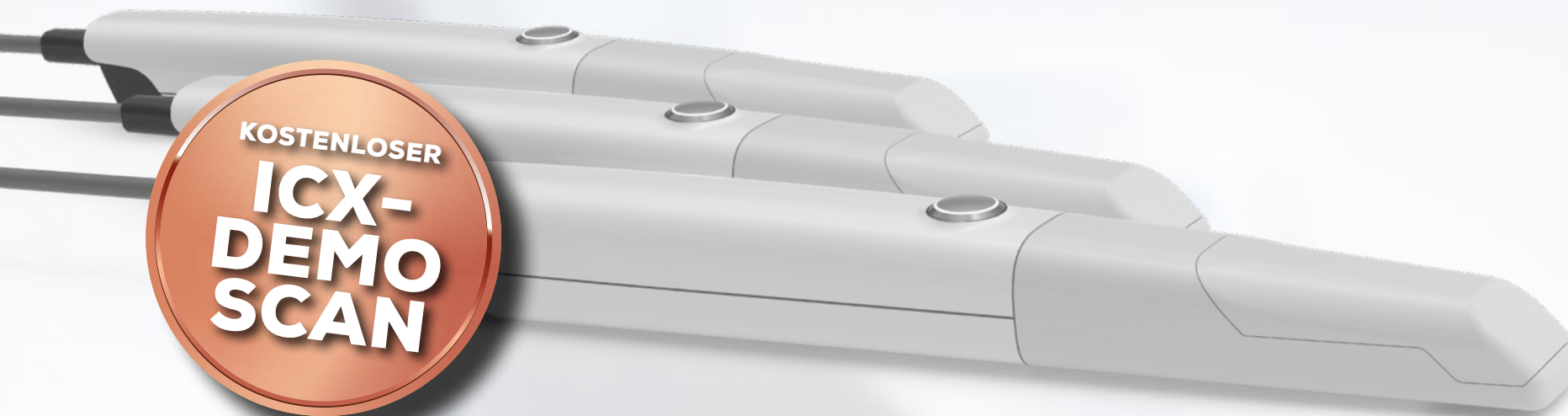

Hier anmelden!



IHR PERSÖNLICHER ICX-DEMO SCAN – KOSTENFREI, UNKOMPLIZIERT, GEWINNBRINGEND

Sie möchten den Einstieg in die digitale Abformung mit dem ICX-P5 Scanner möglichst einfach und effizient gestalten?

Wir bieten Ihnen einen exklusiven und **kostenfreier** ICX-DEMO SCAN direkt in Ihrer Praxis an – perfekt, um unser System in der Praxis zu erleben und erste Behandlungserfolge zu erzielen.

SO FUNKTIONIERT'S:

Wir kommen zu Ihnen – **kostenlos:** Unser Expertenteam besucht Ihre Praxis mit vollständig vorbereitetem Equipment – inklusive Scanner, Rechner und Software.

Sie organisieren den Patienten: Diese wird am ICX-DEMO SCAN live & **kostenlos** in Ihrer Praxis abgescannt. Ideal sind Patienten, bei denen eine Aligner-Therapie in Frage kommt.

Hier anmelden!



Der ICX-P5 Scanner ist das ideale Tool für die digitale Erfassung bei der Patienten-Neuaufnahme: Der Patient erhält sofort einen visuellen Überblick über seinen Zahnstatus, während Zahnarzt oder ZMF eine gezielte und fundierte Beratung direkt im Anschluss durchführen können.

VORTEILE AUF EINEN BLICK:

Kein Risiko: Sie testen den Scanner unter Realbedingungen.

Kein Aufwand: Wir übernehmen den Aufbau und die technische Begleitung.

Flexible Erweiterung: Nutzen Sie den ICX-DEMO SCAN als Einstieg in die digitale Kieferorthopädie.

Jetzt Termin sichern und durchstarten!

Wir denken nicht in Quartalen – sondern in Jahren.
Für echte Zukunftssicherheit in Ihrer Praxis.

Bei technischen Fragen, wenden Sie sich bitte an unseren Support:
Mobil: 02641 9110-0 · Email: scanner@medentis.de

***Jetzt Termin sichern
und durchstarten!***

SERVICE-TEL.: 02641 9110-0

oder

Email:

scanner@medentis.de



ICX-P5

PREMIUM & FAIR!

UND

ICX-BAMBOO PRO

MOBILES SYSTEM FÜR IHREN
ICX-P5 INTRAORAL SCANNER



Hier anmelden!



Zum ICX-Shop!



DAS DREAM-TEAM FÜR IHRE PRAXIS!

Die Lieferzeit beträgt ca. 8 Wochen. Die Angebote sind gültig bis auf Widerruf. *Preise zzgl. gesetzl. MwSt..



ICX-Standardpreis	VK PREIS*		
Sie sparen 2.701€ gegenüber dem Listenpreis! AL-200005 - ICX-P5 ICX-P5 Intraoral Scanner	pro Stück	Anzahl	ICX-P5
	Sofort-Barpreis 9.999,00 €		
Farbe: AL-200005-W Kristallweiß			
MONATLICHE RATE: *Bei einer Leasing-Laufzeit von 60 Monaten.	Rate: 207,- €* 		

ICX-Einführungspreis	VK PREIS*		
Sie sparen 4.970€ gegenüber dem Listenpreis! AL-200006 - ICX-FREE ICX-FREE Intraoral Scanner	pro Stück	Anzahl	ICX-FREE
	Sofort-Barpreis 11.990€		
Farbe: AL-200005-W Kristallweiß			
MONATLICHE RATE: *Bei einer Leasing-Laufzeit von 60 Monaten.	Rate: 244- €* 		

Kombi-Paket ICX-P5 + ICX-BAMBOO PRO	VK PREIS*		
Sie sparen 2.000€ gegenüber dem Listenpreis! AL-Paket-ICX-P5 ICX-P5 Intraoral Scanner und ICX-BAMBOO PRO Mobile Station	pro Kombi-Paket	Anzahl	ICX-P5 + ICX-BAMBOO PRO
	18.999 € Sofort-Barpreis 16.999 €		
MONATLICHE RATE: *Bei einer Leasing-Laufzeit von 60 Monaten.	Rate 340,- €* 		

Die Lieferzeit beträgt ca. 8 Wochen. Die Angebote sind gültig bis auf Widerruf. *Preise zzgl. gesetzl. MwSt..

Ich habe diesen Hinweis gelesen und akzeptiere, dass die Firma medentis medical GmbH diese Produkte als Distributor für die Firma ZIYANG FREQTY MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. vertreibt. Den Datenschutzhinweis der Firma ZIYANG FREQTY MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. finden sie anhängend oder unter <https://en.freqtek.com/account/PRIVACYPOLICYEn.html>.

JA

Name

Kd.-Nr.

Datum, Unterschrift

*Alle Preise in Euro zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer, bis auf Widerruf (Stand 01.02.26)

Praxis Stempel

ICX-P5

PREMIUM & FAIR!

EINFACH.
OFFEN.
WIRTSCHAFTLICH.

Distribution:

medentis medical GmbH
Walporzheimer Str. 48-52
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler
Deutschland / Germany
Tel.: +49 2641 9110-0
www.medentis.de · info@medentis.de

INTRAORAL SCANNER

MEHR EFFIZIENZ. MEHR KOMFORT. MEHR UMSATZ.
DIGITAL IST IHR VORTEIL!



ONE VISION. ICX.

medentis
medical