

ICX

DAS FAIRE
PREMIUM
IMPLANTAT-
SYSTEM.

Wir sind nicht die Nr. 1 – aber auf dem Weg dahin!

Gebündelte Erfahrung, weitergedacht –
mit einem klaren Anspruch an Qualität
und Präzision.


ICX-FLEX KLEBEBASEN:

Maximale Flexibilität für den
abgewinkelten Schraubenkanal.

Die ICX-Flex Klebebasis mit abgewinkeltem
Schraubenkanal bietet eine innovative
Lösung für herausfordernde Fälle, bei
denen eine ungünstige Implantatposition
oder ästhetisch anspruchsvolle Gegeben-
heiten vorliegen.




0°-30° Abwinklung
Diagonal & vertikal
kürzbar!

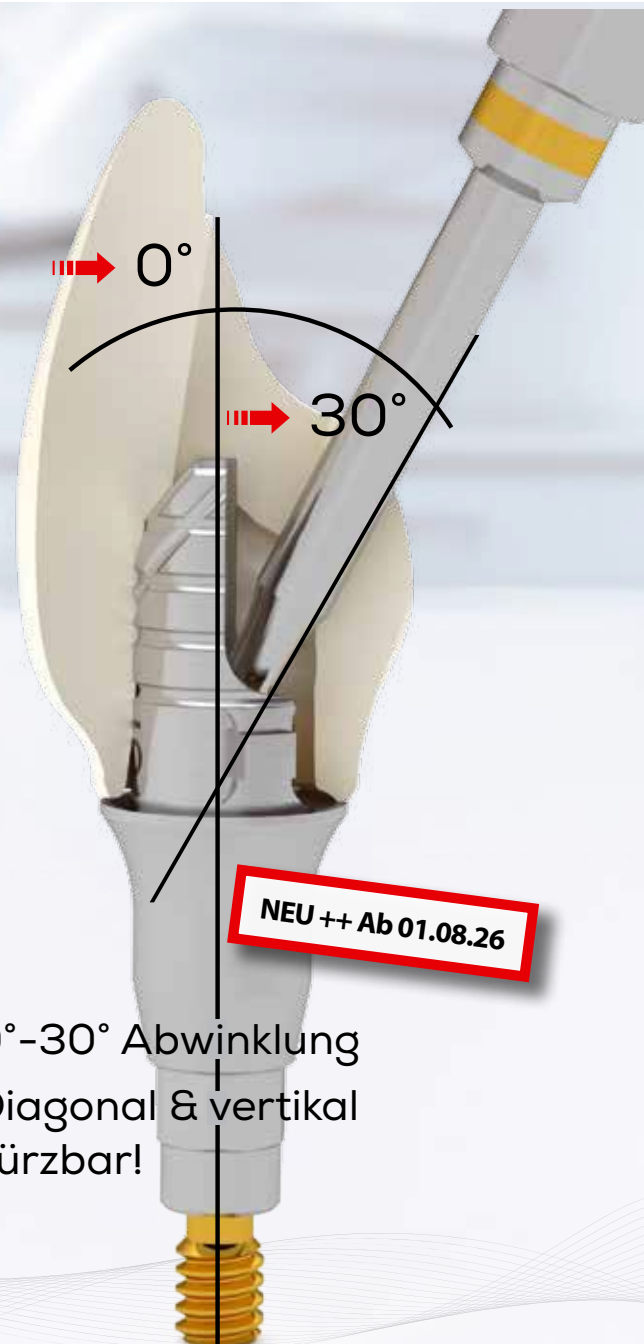

ONE VISION – BE SMART. BE ICX.

medentis
medical

DIE ICX-FLEX TITAN-KLEBEBASEN.

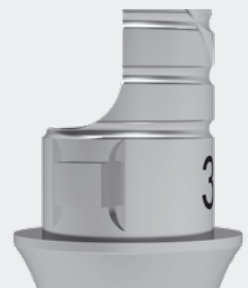


DIE ICX-FLEX KLEBEBASIS MIT ABGEWINKELTEM SCHRAUBENKANAL – PRÄZISION UND FLEXIBILITÄT FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE

Die ICX-Flex Klebebasis vereint innovative Technik und höchste Qualität, um Zahnärzten und Zahntechnikern eine zuverlässige und anpassungsfähige Lösung zu bieten.

Dank ihrer durchdachten Geometrie ermöglicht die ICX-FLEX-Klebebasis eine präzise Anpassung und Ausrichtung des Schraubenkanals. Dieser kann flexibel nach oral verlegt und in zwei verschiedenen Längen individuell gekürzt werden. So wird eine optimale Funktionalität und Ästhetik bei besonders speziellen Ansprüchen, gerade im Frontzahnbereich, sichergestellt.


ICX-FLEX GINGIVAHÖHEN

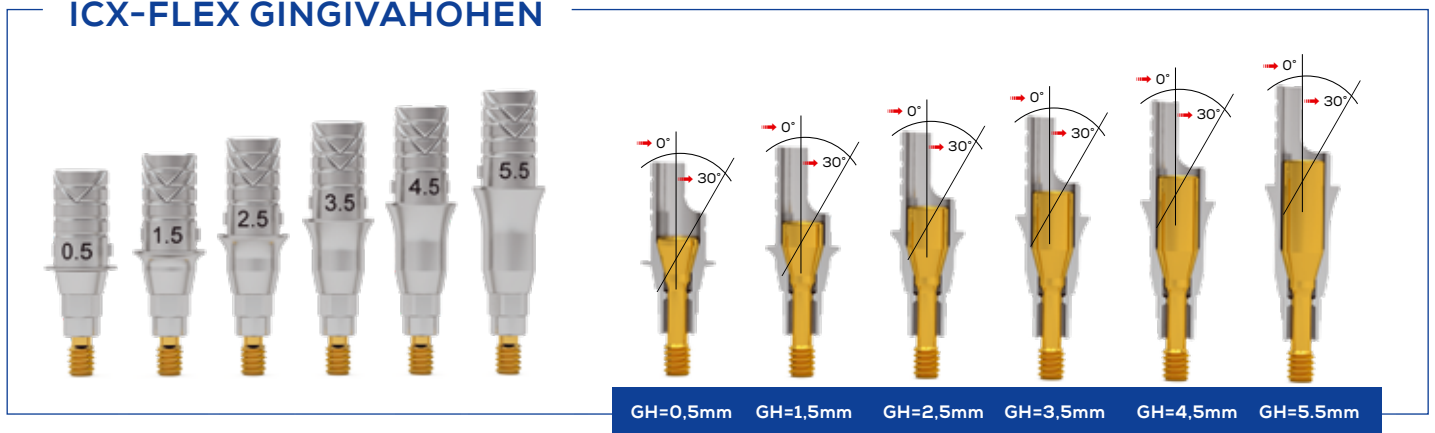

WICHTIGER HINWEIS: Alle Schrauben der Flex Klebebasen besitzen einen Torx und sind **IMMER** Gold anodisiert. Ebenso ist jede Schraube einer Gingivahöhe zugeordnet und nicht untereinander kompatibel.

VORTEILE DER ICX-FLEX KLEBEBASEN

- ➡ diagonal & vertikal kürzbar
- ➡ abgewinkelter Schraubenkanal
- ➡ doppelter Verdrehschutz
- ➡ optimiertes Klebe-Interface
- ➡ optimiertes und schlankeres Emergenzprofil

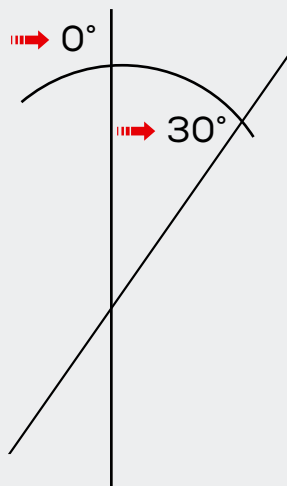

➡ 30° Abwinklung



medentis
medical

➡ Diagonal & vertikal kürzbar!

Vereinbaren Sie einen Termin zur ICX-Flex Vorstellung!

Service-Tel.: +49 (0)2641 9110-0 · Email: beratung@medentis.de

DIE ICX-FLEX TITAN-KLEBEBASEN.

VARIABLE KAMINHÖHE



Die Kaminhöhe (KH) 6 mm unterstützt auch hohe Restaurationen, sie kann jedoch individuell auf 5 und 4mm diagonal gekürzt werden und passt sich damit bei geringerer vertikaler Distanz perfekt der klinischen Situation an.

OPTIMIERTES EMERGENZPROFIL

Das optimierte Emergenzprofil unterstützt und schützt das Weichgewebe.

ABGEWINKELTER SCHRAUBENKANAL

Durch die Kugel-Torx Schraubendreheraufnahme sind Abwinkelungen bis zu maximal 30° möglich.

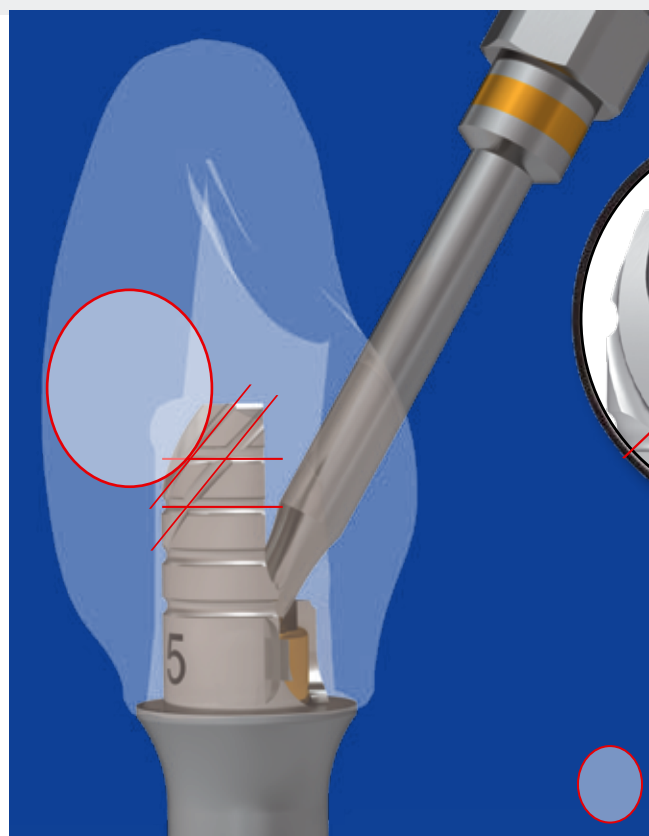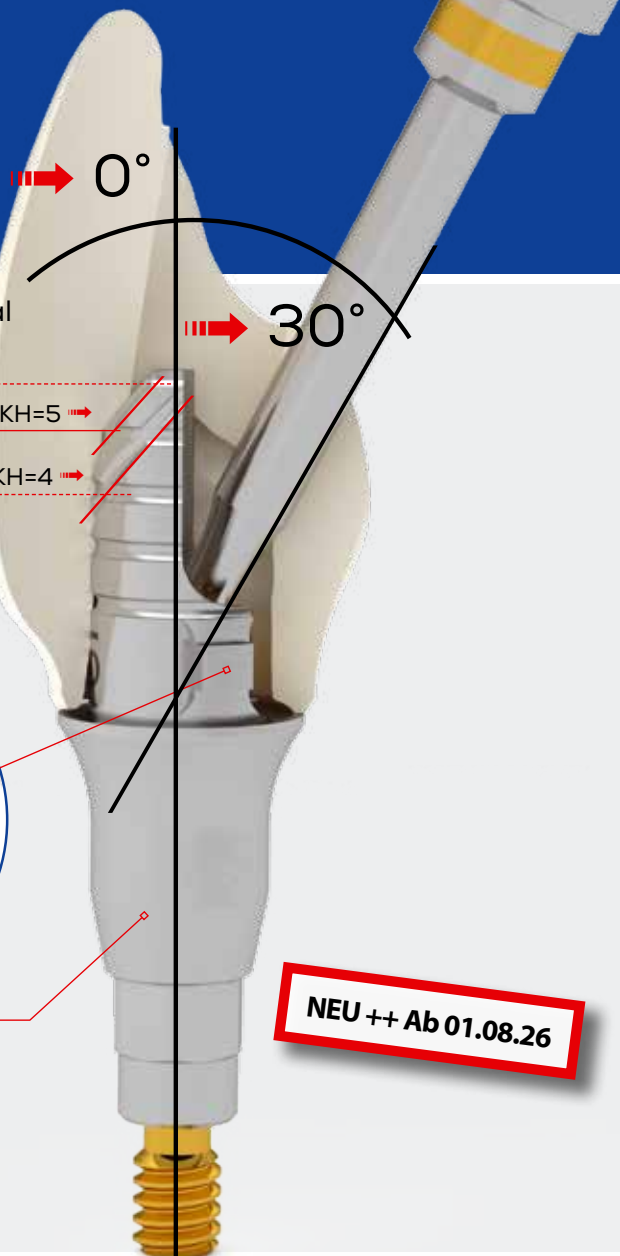

0°-30° Abwinkelung

Diagonal kürzbar!
Für optimale Wandstärke
der Zirkon-Kronen.




ICX-Flex im Shop!

FÜR VERBESSERTER PROTHETISCHE VERSORGUNGEN

Die Klebebasis ICX-Flex für ICX-Standard und ICX-3.3mm erweitert das bestehende Klebebasis-Portfolio um zusätzliche funktionale Eigenschaften. Sie verfügt über einen geraden Schraubenkanal und kann wahlweise als rotierende oder rotationsgesicherte Komponente eingesetzt werden, wodurch unterschiedliche Versorgungsoptionen für Einzelkronen und Brücken unterstützt werden.

Das Design der ICX-Flex Klebebasis umfasst verschiedene Gingivahöhen. Der längere Kamin ist so ausgelegt, dass er bei Bedarf individuell auf die gewünschte Höhe angepasst werden kann.

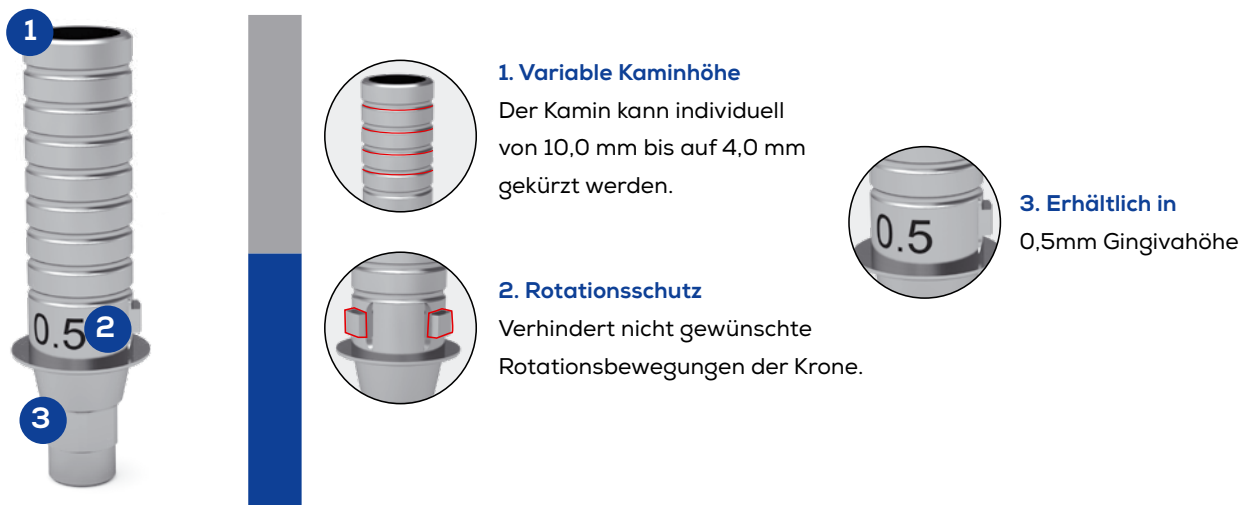

NON-HEX KLEBEBASIS FÜR VERBLOCKTE SUPRAKONSTRUKTIONEN

Unsere Non-Hex Klebebasen mit hohem Kamin, wurden speziell für verblockte implantatgetragene Suprakonstruktionen entwickelt. Durch den Verzicht auf eine antirotatorische Hex-Verbindung ermöglichen sie einen spannungsärmeren und passiveren Sitz – ideal bei mehrgliedrigen Brücken und komplexen Implantatachsen.




DIE ICX-FLEX TITAN-KLEBEBASEN.

FÜR ÄSTHETISCH ANSPRUCHSVOLLE FÄLLE

Das wegweisende Design der Klebebasis ICX-Flex wurde speziell für abgewinkelte Schraubenkanäle entwickelt und eignet sich ideal für die Anforderungen von prothetischen Versorgungen in der ästhetischen Zone.


ICX-FLEX KLEBEBASIS GERADE UND ABGEWINKELT

Bei einer ungünstigen Implantatposition oder einer Implantatposition in der ästhetischen Zone besteht die Möglichkeit, den Schraubenkanal in den nicht sichtbaren Bereich zu verlagern.

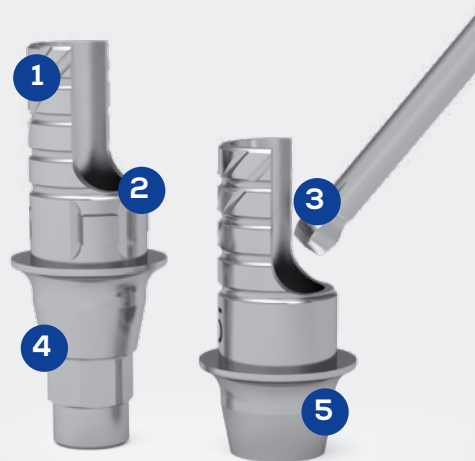

1. Variable Kaminhöhe

Der Kamin kann individuell von 6,0 mm auf 5,0 und 4,0 mm gekürzt werden.

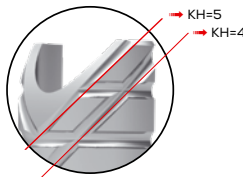

2. Schraubenkanal

Kompatibel mit abgewinkelten und geraden Schraubenkanälen.



3. Kugel-Torx Eindrehinstrument

Für Angulationen bis 30°. Für ein müheloses und zuverlässiges Anziehen der Schraube.



4. Erhältlich in mehreren Gingivahöhen

Gingivahöhen von 0,5 mm bis 5,5 mm für mehr Flexibilität.



5. Rotierende Version

Für mehr Flexibilität bei Brücken und Stegversorgungen



NEU ++ Ab 01.08.26



ICX-Flex im Shop!

WICHTIGER HINWEIS:

**DIE ANWENDUNGEN UND DIE PRODUKTFUNKTIONEN SIND FÜR
DIE ICX-FLEX KLEBEBASEN STANDARD UND 3.3mm IDENTISCH!**

ICX-FLEX TITAN-KLEBEBASEN



ÜBERSICHT: ICX-FLEX System Ø3.3mm



ICX-Flex im Shop!

NEU ++ Ab 01.08.26

ICX-Flex Klebebasen 3.3mm

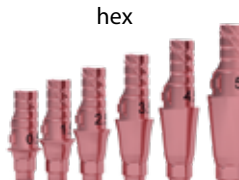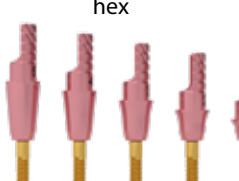Artikel-Nr.	Artikel 3.3mm	Dimensionen/Material		Preis €
N-029-011101	ICX-Flex 3.3-Klebebasis	GH=0.5mm	 hex	45,-
N-029-011107	ICX-Flex 3.3-Klebebasis	GH=1.5mm		45,-
N-029-011108	ICX-Flex 3.3-Klebebasis	GH=2.5mm		45,-
N-029-011109	ICX-Flex 3.3-Klebebasis	GH=3.5mm		45,-
N-029-011104	ICX-Flex 3.3-Klebebasis	GH=4.5mm		45,-
N-029-011105	ICX-Flex 3.3-Klebebasis	GH=5.5mm		45,-
N-029-011001	ICX-Flex 3.3-Klebebasis non-hex	GH=0.5mm	 non hex	45,-
N-029-011007	ICX-Flex 3.3-Klebebasis non-hex	GH=1.5mm		45,-
N-029-011008	ICX-Flex 3.3-Klebebasis non-hex	GH=2.5mm		45,-
N-029-011009	ICX-Flex 3.3-Klebebasis non-hex	GH=3.5mm		45,-
N-029-011004	ICX-Flex 3.3-Klebebasis non-hex	GH=4.5mm		45,-
N-029-011005	ICX-Flex 3.3-Klebebasis non-hex	GH=5.5mm		45,-
N-029-201101	ICX-Flex, 0°, 3.3 Klebebasis, hex	K = 10mm, GH 0,5mm	 hex non hex	45,-
N-029-201001	ICX-Flex, 0°, 3.3-Klebebasis, non hex	K = 10mm, GH 0,5mm		45,-
C-015-100050	Schraubendreher, Torx	kurz		49,-
C-015-100051	Schraubendreher, Torx	mittel		49,-
C-015-100052	Schraubendreher, Torx	lang		49,-
N-030-000006	ICX-Scanbasis 2.0	Neu!		39,-

ICX-Flex 3.3mm Klebebasen / Heilkappen

Artikel-Nr.	Artikel 3.3mm	Dimensionen/Material		Preis €
N-004-362001	ICX-Flex 3.3 Heilkappe, gerade,	Ø3.6 K=2 f. GH=0.5mm		29,-
N-004-362007	ICX-Flex 3.3 Heilkappe, gerade	Ø3.6 K=2 f. GH=1.5mm		29,-
N-004-362008	ICX-Flex 3.3 Heilkappe, gerade	Ø3.6 K=2 f. GH=2.5mm		29,-
N-004-362009	ICX-Flex 3.3 Heilkappe, gerade	Ø3.6 K=2 f. GH=3.5mm		29,-
N-004-362004	ICX-Flex 3.3 Heilkappe, gerade	Ø3.6 K=2 f. GH=4.5mm		29,-
N-004-362005	ICX-Flex 3.3 Heilkappe, gerade	Ø3.6 K=2 f. GH=5.5mm		29,-



ICX-Flex im Shop!

ÜBERSICHT:

ICX-FLEX System - Standard Ø3,45 · Ø3,75 · Ø4,1 · Ø4,8mm

NEU ++ Ab 01.08.26

ICX-Flex Klebebasen Standard Ø3,45 · 3,75 · 4,1 · 4,8mm

Artikel-Nr.	Artikel Standard Ø3,45 · 3,75 · 4,1 · 4,8mm	Dimensionen/Material		Preis €
C-029-011102	ICX-Flex-Klebebasis, Standard	GH=0.5mm	 hex	45,-
C-029-011107	ICX-Flex-Klebebasis, Standard	GH=1.5mm		45,-
C-029-011108	ICX-Flex-Klebebasis, Standard	GH=2.5mm		45,-
C-029-011109	ICX-Flex-Klebebasis, Standard	GH=3.5mm		45,-
C-029-011104	ICX-Flex-Klebebasis, Standard	GH=4.5mm		45,-
C-029-011105	ICX-Flex-Klebebasis, Standard	GH=5.5mm		45,-
C-029-011002	ICX-Flex-Klebebasis, Standard non-hex	GH=0.5mm	 non hex	45,-
C-029-011007	ICX-Flex-Klebebasis, Standard non-hex	GH=1.5mm		45,-
C-029-011008	ICX-Flex-Klebebasis, Standard non-hex	GH=2.5mm		45,-
C-029-011009	ICX-Flex-Klebebasis, Standard non-hex	GH=3.5mm		45,-
C-029-011004	ICX-Flex-Klebebasis, Standard non-hex	GH=4.5mm		45,-
C-029-011005	ICX-Flex-Klebebasis, Standard non-hex	GH=5.5mm		45,-
C-029-201102	ICX-Flex Klebebasis, Standard	GH=0.5mm; K=10mm	 hex non hex	45,-
C-029-201002	ICX-Flex Klebebasis, Standard non-hex	GH=0.5mm; K=10mm		45,-
C-015-100050	Schraubendreher, Torx	kurz		49,-
C-015-100051	Schraubendreher, Torx	mittel		49,-
C-015-100052	Schraubendreher, Torx	lang		49,-
C-030-000006	ICX-Scanbasis 2.0	Neu!		39,-

ICX-Flex Standard Klebebasen / Heilkappen

Artikel-Nr.	Artikel Standard Ø3,45 · 3,75 · 4,1 · 4,8mm	Dimensionen/Material		Preis €
C-004-442002	ICX-Flex Heilkappe, gerade, Standard	Ø4.4 K=2 f. GH=0.5mm		29,-
C-004-442007	ICX-Flex Heilkappe, gerade, Standard	Ø4.4 K=2 f. GH=1.5mm		29,-
C-004-442008	ICX-Flex Heilkappe, gerade, Standard	Ø4.4 K=2 f. GH=2.5mm		29,-
C-004-442009	ICX-Flex Heilkappe, gerade, Standard	Ø4.4 K=2 f. GH=3.5mm		29,-
C-004-442004	ICX-Flex Heilkappe, gerade, Standard	Ø4.4 K=2 f. GH=4.5mm		29,-
C-004-442005	ICX-Flex Heilkappe, gerade, Standard	Ø4.4 K=2 f. GH=5.5mm		29,-
C-004-652002	ICX-Flex Heilkappe, konisch, Standard	Ø6.5 K=2 f. GH=0.5mm		29,-
C-004-652007	ICX-Flex Heilkappe, konisch, Standard	Ø6.5 K=2 f. GH=1.5mm		29,-
C-004-652008	ICX-Flex Heilkappe, konisch, Standard	Ø6.5 K=2 f. GH=2.5mm		29,-
C-004-652009	ICX-Flex Heilkappe, konisch, Standard	Ø6.5 K=2 f. GH=3.5mm		29,-
C-004-652004	ICX-Flex Heilkappe, konisch, Standard	Ø6.5 K=2 f. GH=4.5mm		29,-
C-004-652005	ICX-Flex Heilkappe, konisch, Standard	Ø6.5 K=2 f. GH=5.5mm		29,-

ICX

DAS FAIRE
PREMIUM
IMPLANTAT-
SYSTEM.


Bewährtes Wissen, effizient angewendet.

ICX-FLEX KLEBEBASEN:

Maximale Flexibilität für den
abgewinkelten Schraubenkanal.

Erprobte Erkenntnisse,
konsequent umgesetzt –
für planbare und
sichere Versorgung.

NEU ++ Ab 01.08.26

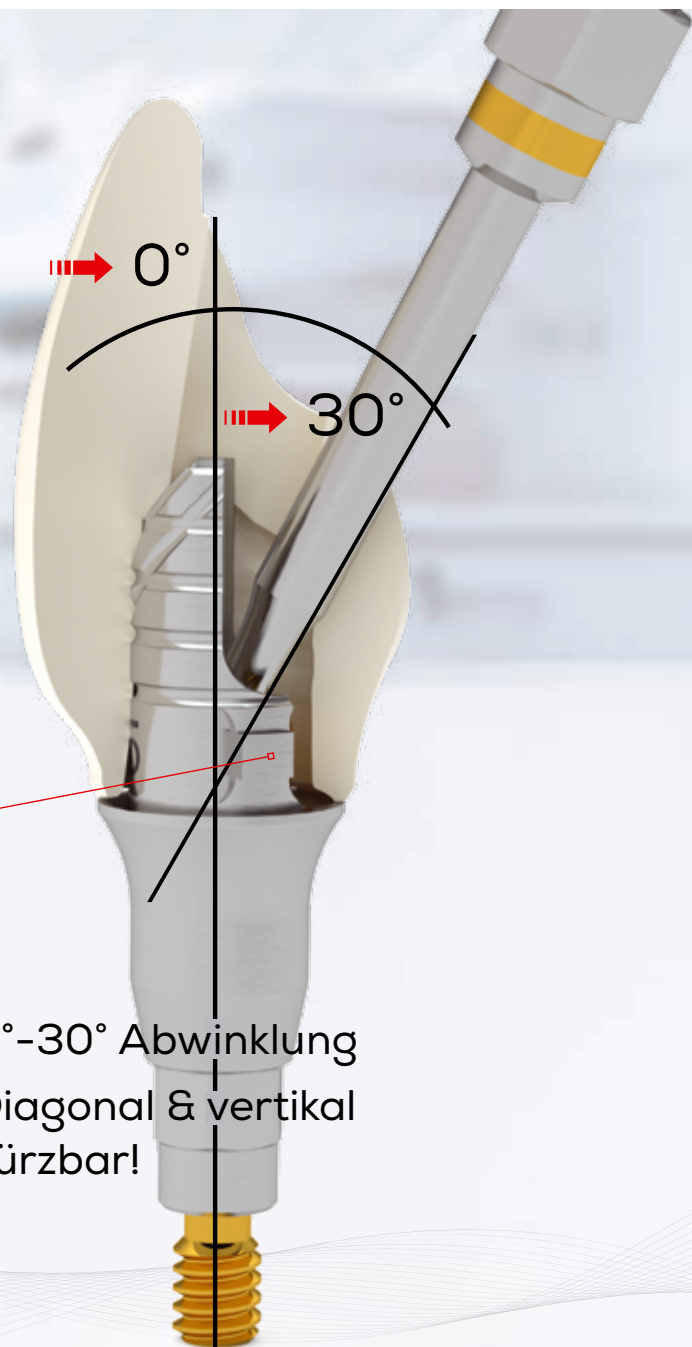

0°-30° Abwinklung
Diagonal & vertikal
kürzbar!



ICX-Flex im Shop!

Vereinbaren Sie einen Termin zur ICX-Flex Vorstellung!

Service-Tel.: +49 (0)2641 9110-0

Email: beratung@medentis.de

ONE VISION – BE SMART. BE ICX.

medentis
medical