

ICX-MINI[®]

... das zweiteilige ICX-MINI[®] Ø 2,9mm Kugelkopf-Implantat

BEWÄHRT, MINIMAL-INVASIV UND VORHERSAGBAR.

Das ICX-Implantat für die Sofortversorgung –
auch bei beschränktem Platzangebot!



Maximus-Aufbauten**
für ICX-MINI[®] Ø 2,9mm

**Kompatibel mit LOCATOR™



Rufen Sie uns an – wir reagieren sofort:

ALEXANDER SCHOLZ

CEO, Gesellschafter

und Gründer medentis medical

medentis
medical

ICX-MINI[®]

... unsere zweiteiligen ICX-MINI[®] Ø 2,9mm Kugelhaupt-Implantate können Ihren Patienten ein zufriedeneres und entspannteres Leben schenken.



ICX-MINI[®]: das ICX-Implantat für die Sofortversorgung!

Das zunehmende Alter der Bevölkerung bringt immer mehr Senioren in die Praxis, die als vitale, lebensbejahende Menschen einen abwechslungsreichen und unterhaltsamen Ruhestand genießen möchten. Für diese Patienten ist eine hohe Lebensqualität mit gestiegenem Anspruchsniveau – auch bei Kaufunktion, Aussprache und Aussehen – bis ins hohe Alter sehr wichtig.

Das ICX-MINI[®] Implantat von medentis medical versorgt diese anspruchsvollen Patienten kostengünstig mit einer zuverlässigen Fixation für Teil- oder Vollprothesen im Ober- und Unterkiefer.

Das bewährte, minimalinvasive OP-Protokoll der ICX-MINI[®]-Implantate ermöglicht dem Zahnarzt einen sehr vorhersagbaren und für den Patienten sehr schonenden Eingriff.

- ➔ Der reduzierte Implantatdurchmesser von 2,9mm eignet sich auch ideal für Indikationen mit beschränktem Platzangebot und schwierigen anatomischen Verhältnissen.
- ➔ Das ICX-MINI[®]-Implantat ist bevorzugt zur Sofortbelastung konzipiert worden.
- ➔ Die bewährte Oberflächenkonditionierung der ICX-MINI[®]-Implantate sorgt für eine sichere Osseointegration – auch bei Sofortbelastungen – nach den Richtlinien des BDIZ.




Anwendung:

Kugelhaupt herausdrehen

Maximus-Aufbau aufbringen und eindrehen

= fertig.

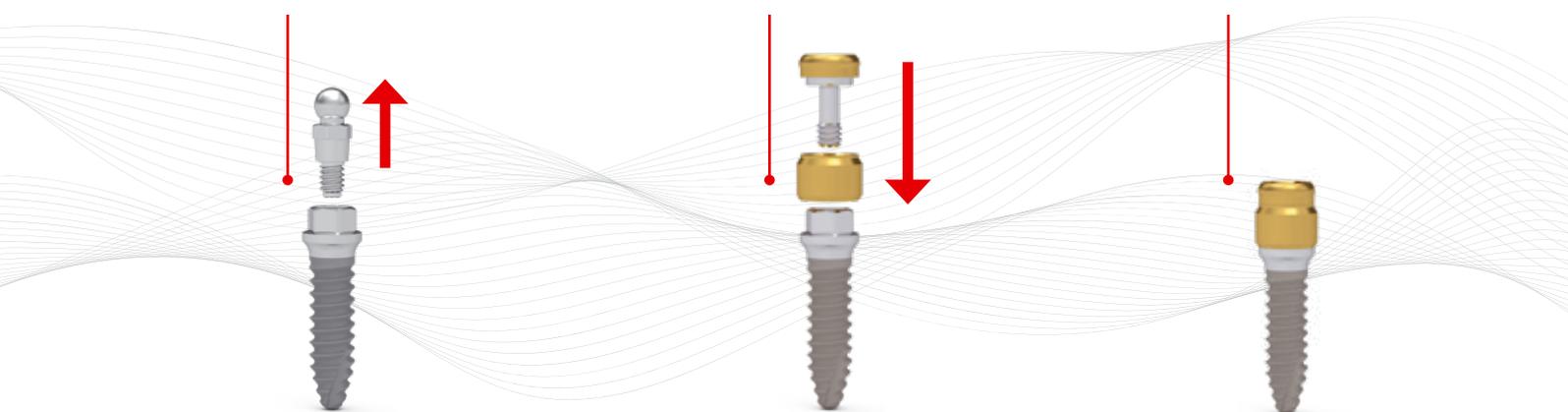

**Der zweiteilige ICX-Maximus-Aufbau ist eine eigene Weiterentwicklung von medentis medical und kompatibel mit LOCATOR[™]-Matrizen.

*Produkte mit © und [™] sind eingetragene Warenzeichen des jeweiligen Herstellers.

Mo.-Fr.: 7.30 bis 19 Uhr · Service-Tel.: +49 (0)2641 9110-0 · www.medentis.de


ICX-MINI®-zweiteilig – die Vorteile:

- ▶ bei Verschleiß und Abnutzung einfach auswechselbar
- ▶ sofort belastbar
- ▶ ideales Preis/Leistungsverhältnis!



DIE BESTE VERSORGUNG. ZUM GÜNSTIGSTEN PREIS.

1 x ICX-Mini Implantat 2,9 (inkl. Kugelkopf) **+ 79,00 €**
 1 x T-Ecco Matrize (inkl. Modellanalog) **+ 49,00 €**
 2 x ICX Bohrer **+ 19,80 €**

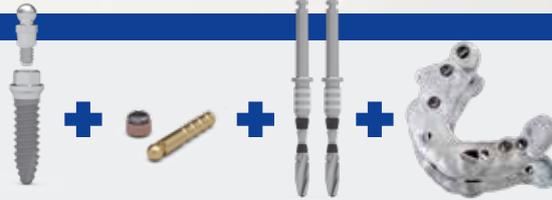

plus:
1 x Schablone bei eigener Planung mit ICX-MAGELLAN X:


+ 79,00 €

= 226,80 €*

plus:
1 x Schablone mit Planungsvorschlag von medentis, ohne eigene Planungssoftware:

+ 158,00 €

= 305,80 €*

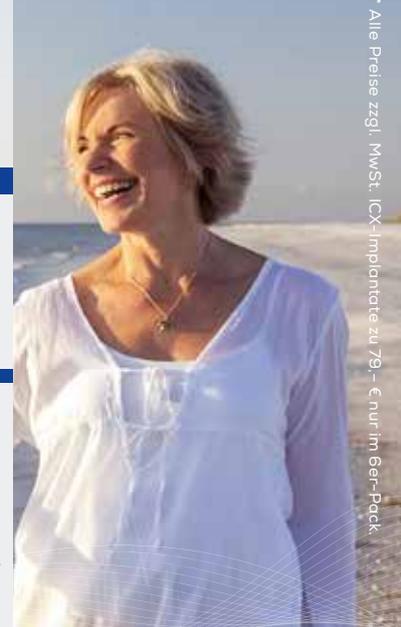

* Alle Preise zzgl. MwSt. ICX-Implantate zu 79,- € nur im Ger-Pack

Insertionsprotokoll ICX-MINI® Ø 2,9 mm – einfach & sicher:


Schritt 1:

Steriles Implantat-Röhrchen öffnen



Schritt 2:

Erste und einzige Bohrung vornehmen (Transgingival)

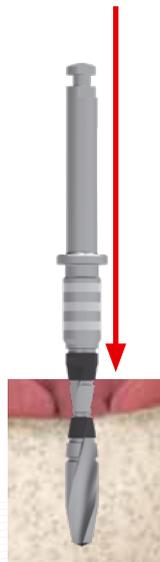

Schritt 3:

Steriles Implantat entnehmen



Schritt 4:

Implantat mit Ratsche final festsetzen



Oder per Post an: medentis medical GmbH · Walporzheimer Str. 48-52 · 53474 Bad Neuenahr/Ahrweiler

X	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis (Euro)*
		ICX_MAXIMUS-AUFBAU (KOMPATIBEL MIT LOCATOR™)		
	C-031-030001	ICX-Maximus für ICX-MINI, bestehend aus Hülse und Schraube		99,-*

X	Artikel-Nr.	ICX-MINI-Implantate und Zubehör	Menge	Preis (Euro)*
	C-001-290080	ICX-MINI Ø 2,9 x 8mm (Stück je 79,- nur im Sechserpack lieferbar)		474,-*
	C-001-290100	ICX-MINI Ø 2,9 x 10mm (Stück je 79,- nur im Sechserpack lieferbar)		474,-*
	C-001-290125	ICX-MINI Ø 2,9 x 12,5mm (Stück je 79,- nur im Sechserpack lieferbar)		474,-*
	C-031-852700	Retentionseinsatz pink (4er Pack), ca. Abzugskräfte 1.360g, Divergenzausgleich ± 10°		19,-*
	C-031-854700	Retentionseinsatz grün (4er Pack), ca. Abzugskräfte 1.590g, Divergenzausgleich ± 20°		19,-*
	C-031-852400	Retentionseinsatz transparent (4er Pack), ca. Abzugskräfte 2.265g, Divergenzausgleich ± 10°		19,-*
	C-031-852900	Retentionseinsatz blau (4er Pack), ca. Abzugskräfte 680g Divergenzausgleich ± 10°		19,-*
	C-031-854800	Retentionseinsatz rot (4er Pack), ca. Abzugskräfte 680g Divergenzausgleich ± 20°		19,-*
	C-031-851500	Laboreinsatz schwarz (4er Pack), ca. Abzugskräfte 680g Divergenzausgleich ± 20°		19,-*
	C-031-851902	Matrizen (Titankappen mit Retentions-einsätzen, 2er Pack)		43,50*
	C-031-851910	Matrizen (Titankappen mit Retentions-einsätzen, 10er Pack)		199,-*
	LO-8393	Core Tool (Allzweckinstrument)		66,-*
	C-031-850501	Abdruckpfosten (4er Pack)		59,-*
	C-031-853001	Modellanalog (Ø 4 mm) (4er Pack)		59,-*
	LO-8913	Einsatz für Drehmomentschlüssel (kurz) 23 mm		49,-*
	LO-8914	Einsatz für Drehmomentschlüssel (lang) 29 mm		49,-*
	C-015-100028	Pinzette, Länge 144mm		49,-*

*Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Unser kostenfreier Express-Service für Sie!

Wenn Sie bis 19.00 Uhr bestellen, erhalten Sie Ihre Ware mit „Express-Saver“ bis mittags des nächsten Werktages geliefert; und das ohne Versandkosten und ohne Mindestbestellwert, innerhalb Deutschlands.

Ja, bitte rufen Sie mich zurück. Ich möchte einen ICX-System-Vorstellungs-Termin vereinbaren.

Ja, bitte senden Sie mir das ICX-System-Info-Paket an untenstehende Adresse zu.

Bitte beachten Sie unsere Hinweise zum Datenschutz: <https://medentis.de/wp/datenschutz/>



Name

Kd.-Nr.

Datum, Unterschrift

Praxis Stempel

*Alle Preise in Euro zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer, bis auf Widerruf, (Stand 01.09.22). Ich akzeptiere die AGB's der medentis medical GmbH.