

Das FAIRE Premium
Implantat-System

ICX

Das

ICX-SlimBoy

Implantat

- ✓ Ästhetisch ideal für Frontzahnbereich und schmale Lücken
- ✓ Höhere Festigkeit und mehr Sicherheit durch die konische Verbindung


Ø 3,2

und

Ø 3,4

59,-€*

je ICX-SlimBoy
Implantat
zzgl. MwSt.

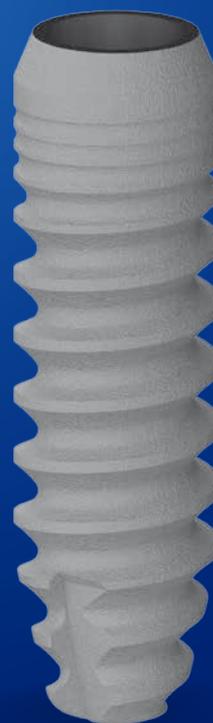

Das ICX-SlimBoy-Implantat: geeignet für Frontzahnbereich & schmale Lücken

Vorteile von schmalen Zahnimplantaten in Bereichen mit geringem Platzangebot

Werden Zähne von Natur aus nicht angelegt, entstehen im Laufe der Gebissentwicklung schmale Lücken, man spricht von Nichtanlagen der Zähne. Betroffen davon sind in erster Linie die Frontzähne im Ober- und Unterkiefer. Diese schmalen Schalllücken können nicht nur ästhetisch beeinträchtigen, sondern auch funktionelle Beschwerden bereiten. Bisher versuchte man, diese Lücken mit kieferorthopädischen Maßnahmen zu schließen, was allerdings sowohl in ästhetischer als auch funktioneller Hinsicht oft keine optimale Lösung darstellt.


In Bereichen mit geringem Platzangebot bieten schmale Zahnimplantate eindeutige Vorteile. Dies liegt an der Entwicklung innovativer Implantattypen mit einem reduzierten Durchmesser, die es erlauben, Mindestkriterien für einen fachgerechten Einsatz einzuhalten.

Sie ermöglichen Zahnersatz in besonders kniffligen Fällen, z.B. im Bereich der Frontzähne.


Wir stellen das ICX-SlimBoy Implantat hier vor und zeigen Ihnen die Vorteile dieser schmalen Zahnimplantate genauer:

Schmale Implantate sind auch als durchmesserreduzierte Implantate bekannt und werden eingesetzt, wenn der Kieferknochen horizontal zurückgegangen ist. Auch bei Vollprothesen, anderen komplizierten Zahnersatzbehandlungen und bei Zahnfehlstellungen in der Kieferorthopädie ist ein schmales Implantat unverzichtbar.

Bei der Einzelzahnversorgung von besonders schmalen zahnbegrenzten Lücken des Oberkiefers haben sich schmale Implantate bewährt und stellen auch eine gute Alternative zur kieferorthopädischen Versorgung mit einer Zahnsperre dar. So kann mit schmalen Zahnimplantaten der geforderte Mindestabstand zu den Nachbarzähnen eingehalten und damit Knochenlamelle und Weichgewebe geschont werden.

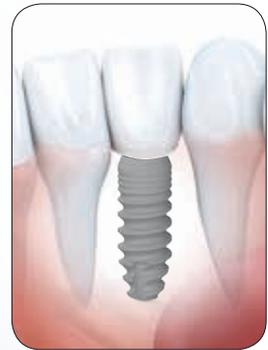

Das ICX-SlimBoy-Implantat: 2 Durchmesser in je 3 Längen

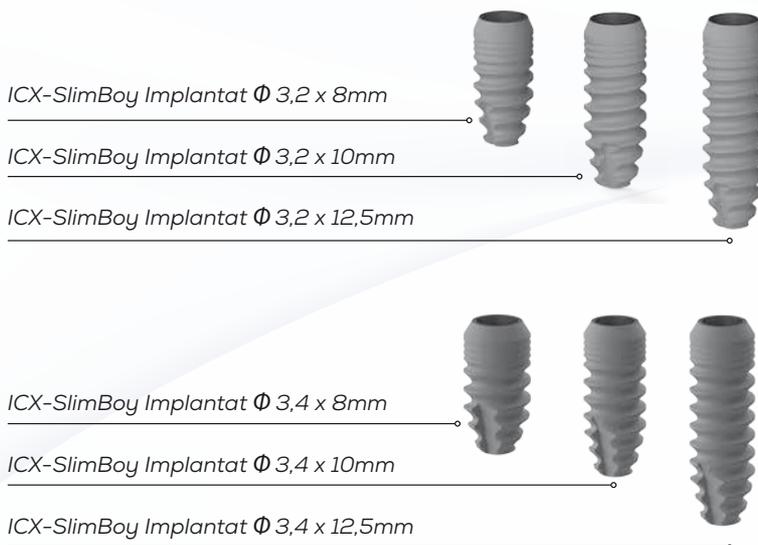

✓ Ästhetisch ideal für Frontzahnbereich und schmale Lücken

✓ Höhere Festigkeit und mehr Sicherheit durch die konische Verbindung

Das FAIRE Premium Implantat-System **ICX**

Das ICX-SlimBoy Implantat

Denn für ein funktionell und ästhetisch zufriedenstellendes Ergebnis sind beide Faktoren wichtig, die Stabilität im Kieferknochen und der Erhalt der Schneidezahnpapille, besonders im Frontzahnbereich.

Die ICX-SlimBoy Implantate bestehen aus dem biologisch vollkommen neutralen Werkstoff Titan Grad 4 KV.

Schmale, stabile Implantate für Frontzähne im Oberkiefer und Unterkiefer

Frontzahnnichtanlagen kommen bei 3-5% aller Anomalien vor.

Die Nichtanlage gerade von Frontzähnen ist nicht nur eine ästhetische Beeinträchtigung, sondern führt, wenn keine gezielte Therapie erfolgt, auch zu funktionellen Nachteilen.

Weitere häufige Ursachen für den Verlust von Frontzähnen sind Unfälle, Sportunfälle sowie chronische Erkrankungen im Besonderen der Unterkiefer Schneidezähne durch Parodontose.

ICX-SlimBoy ist ein Zahnimplantat für die sichere Implantatinsertion in Bereichen mit geringem Platzangebot, in denen eine Behandlung mit einem konventionellen Implantat nicht möglich ist.



Der Indikationsbereich von ICX-SlimBoy Implantaten ist u.a.:

- ✓ als dauerhafter Halt für Vollprothesen
- ✓ schmale Einzelzahnlücken
- ✓ Prämolaren, seitliche Oberkieferschneidezähne, Unterkieferschneidezähne
- ✓ Interimsimplantate zur provisorischen Versorgung
- ✓ Implantate für Zahnbewegungen anstatt Zahnspange vom Kieferorthopäden
- ✓ Stegversorgung für implantatgetragene Suprastruktur

Das ICX-SlimBoy Implantat unterscheidet sich durch die besondere prothetische Verankerungstechnik. Alle Komponenten sind auf die systemspezifischen 1,5° klemmenden und frei um 360° drehbare Konusverbindung abgestimmt.

Anders als bei herkömmlichen ICX-Implantaten ist hier keine interne Verschraubung, sondern alleine die Haftkraft, die durch das Einklopfen des Abutment in das Implantat entsteht, für den Halt verantwortlich. Durch festklopfen wird das Abutment durch eine Kaltverschweißung arretiert. Störende Schraubenkanäle entfallen gänzlich.

Das FAIRE Premium
Implantat-System **ICX**

Das
ICX-SlimBoy
Implantat

Ø 3,2
und
Ø 3,4

Das ICX-SlimBoy-Implantat: geeignet für Frontzahnbereich & schmale Lücken

Die wichtigsten Eigenschaften und Vorteile von ICX-SlimBoy:

- Neue Behandlungsmöglichkeiten - Sichere Implantatinsertion in Bereichen mit geringem Platzangebot.
- Maximale Weichgewebserhaltung - Mit dem integrierten Platform Switching wird eine verbesserte Weichgewebsanlagerung für ein natürliches Aussehen erreicht.
- Starke, passgenaue konische Verbindung - Die konische Innenverbindung ermöglicht eine dichte Passung und sichere Positionierung von Abutments. Durch die schraubenlose konische Verbindung entsteht eine spaltfreie Abutment/Implantat Verbindung bei gleichzeitig hoher mechanischer Stabilität
- Hohe Primärstabilität - Sich erweiternder, wurzelförmiger Implantatkörper zur stetigen Verdichtung des Knochens.
- Maximale Knochenerhaltung - Implantat Spitze mit zwei Bohrschneiden ermöglicht eine minimale Osteotomie.
- Anpassbare Implantatausrichtung - Für eine optimale Ausrichtung der prothetischen Versorgung, insbesondere in Extraktionsalveolen.

Das **ICX-SlimBoy** Implantat

Ø 3,2
und
Ø 3,4

59,-€*
je ICX-SlimBoy
Implantat
*zzgl. MwSt.



Das FAIRE Premium
Implantat-System **ICX**

Service-Tel.: +49 (0)2641 9110-0 · www.medentis.de